

かんたん操作タイプ

電気式人工喉頭

ユアトーンⅡ・ゆらぎ




ボタンを押すだけで、  
簡単に話することができます。



YOURTONE


## Q ユアトーンってなに？

ユアトーンは声が不自由な方の発声を補助する器具で、一般的に「電気式人工喉頭」と呼ばれます。声を失う原因はノドの怪我や病気、喉頭がん、舌がんなどが知られています。

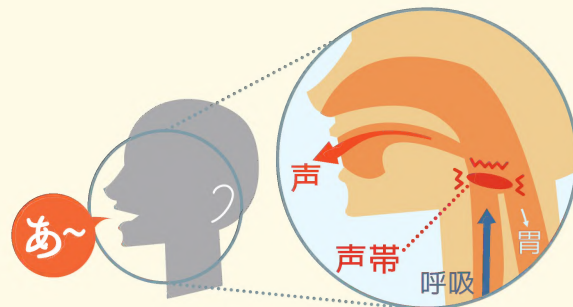

### 発声の仕組み

肺からの息が声帯を通る際に音が出ます。  
この音を舌と口で調節すると話し声になります。

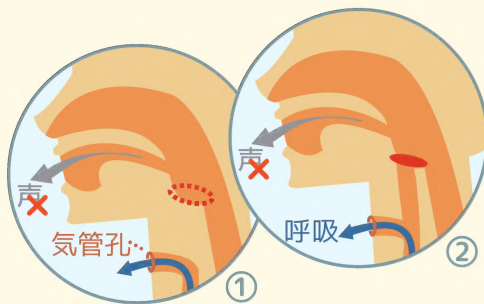

### 声が出ない状態

- ①声帯は喉頭にあるので、喉頭がんの手術等で声帯を失うと、声が出なくなります。
- ②気管切開などでノドに穴が開くと息が声帯を通らなくなるので、声が出ません。



### ユアトーンで話す

- ①ユアトーンのスイッチを押すと音が出ます。
- ②声がよく響く場所に、先端を押し当てます。
- ③タイミングを合わせて口を動かすと、声になります。

## Q 「ユアトーンⅡ・ゆらぎ」に慣れたら…「雨」と「飴」を区別する



ユアトーンⅡ・ゆらぎには声の高低（抑揚）を変化させる機能がないため、同音異義語や疑問の表現ができません。

別売りの指抑揚ユニットをご利用いただくと、「雨」と「飴」を区別して発話したり、語尾を上げて「食べる？」などと尋ねることができます。

オプション：指抑揚ユニット（¥6,000税別）



## ユアトーンⅡ・ゆらぎの特長



## かんたん操作

ボタンを押すだけで  
簡単に話すことができるため、  
ユアトーンをはじめて使う方や、  
機械が苦手な方におすすめです。

スイッチで声質を選択

### やわらかな声


人の声を分析すると、常に細かい音の変化が起きています。この変化は「ゆらぎ」と呼ばれ、声の柔らかさや、聞き取りやすさを生みます。当社では研究開発により、「ゆらぎ」音声をユアトーンに組み込みました(特許 第4940408号)。



発声する度に異なる音(ゆらぎ)

### はっきりとした声

音声にゆらぎを含まない、振動音が一定の単調音でも発声ができます。これは従来より用いられている人工喉頭の音声で、ゆらぎを含んだ音声よりもはっきりとした声になります。

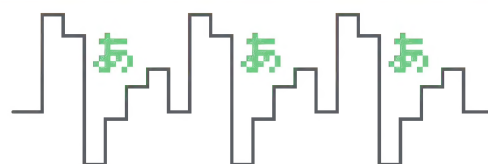

何度繰り返しても完全に同じ音

### 歌える



あらかじめ組み込まれた音楽で、誰でも簡単に歌うことができます。歌の練習は、声と操作のタイミングをあわせる練習にもご活用頂けます。

### 安心




ユアトーンは国産初の電気式人工喉頭で、販売開始より15年以上が経過しました。迅速な修理対応を含めお客様からご好評を頂いております。

## 声の高低を自由に変えられる「ユアトーンⅡ・UB」のご紹介

「ユアトーンⅡ・UB」は左記の指抑揚ユニットがあらかじめ内蔵されており、スライド式のスイッチを操作しながら話すことで、声に高低の変化を付けることができます。声の高低を操作する練習を重ね、カラオケを楽しんでいる方もいらっしゃると思います。

ユアトーンⅡ・UB (¥75,000 非課税・公費補助対象)

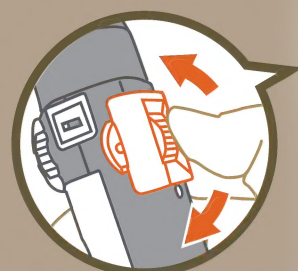

スイッチの上下操作で  
声の高低が変化



## Q セット内容

- ・ユアトーンⅡ・ゆらぎ本体
- ・急速充電器
- ・充電式電池 x 2本
- ・ネックストラップ
- ・取扱説明書
- ・歌モード歌詞カード



## Q 購入について

メーカー希望小売価格

¥ 75,000 (非課税)

**ユアトーンは  
公費補助対象商品です**

手続き方法や適用条件・金額など、  
詳しくはお住まいの市町村役場の福祉  
窓口へお問い合わせ下さい。

## Q 主な仕様

製品名称	ユアトーンⅡ・ゆらぎ
型式番号	DE L J Y-Y 2
寸法重量	外径 38mm 高さ 123mm 重量 140g (電池含む)
本体材質	ABS樹脂・アルミ (カバー部)
動作モード	ノーマルモード、ゆらぎモード、歌モード
充電器	急速充電器付属 充電時間2~5時間 (充電環境による)
付属充電電池	充電式ニッケル水素電池 x 2本
適合電池	付属充電電池およびアルカリ角型電池 (9V-6P型)

※特許 第4940408号

※製品仕様およびデザインは、  
改良のため予告なく変更することがあります。

音質や使いやすさを体験していただくため、**無料貸出機**をご用意しております。  
詳しくは下記、第一医科株式会社までお気軽にお問い合わせ下さい。

製造

ユアトーンの使い方や不明点など  
商品についてのお問い合わせは

**DENCOM**  
DENSET COMMUNICATION Inc.

株式会社 電 制

販売

ご購入・お見積り・修理依頼・デモ機  
貸し出しについては

**First**

**第一医科株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目27番16号  
<http://first-med.co.jp>

TEL 03-3814-0111

FAX 03-3814-0135

〒067-0051 北海道江別市工栄町8番13号  
<http://www.dencom.co.jp>

株式会社 電 制 ブランド事業部

TEL 011-380-2102

FAX 011-398-6668

E-Mail : [yourtone@dencom.co.jp](mailto:yourtone@dencom.co.jp)

※受付時間(祝日を除く月~金) 9:00~17:00